


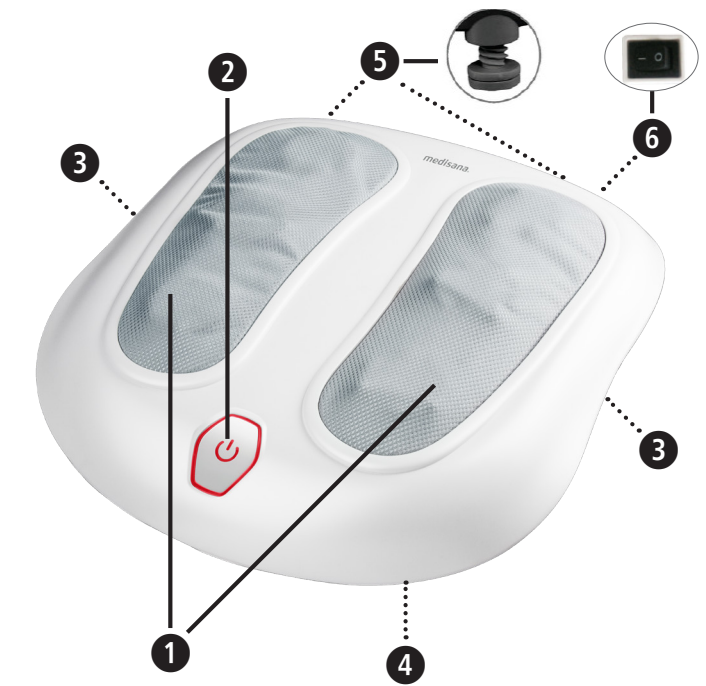

İşaretlerin açıklaması

Bu kullanım kılavuzu bu cihaza aittir. Çalıştırmaya ve kullanıma ilişkin önemli bilgiler içerir. Kullanım kılavuzunun tamamını okuyun. Bu kılavuzun dikkate alınmaması ağır yaralanmalara veya cihazda hasarlara yol açabilir.

UYARI
Kullanıcının olası yaralanmalarını önlemek için bu uyarılar dikkate alınmalıdır

DİKKAT
Cihazda oluşabilecek hasarları önlemek için bu uyarılar dikkate alınmalıdır.

NOT
Bu uyarılar, size kurulum veya çalışma ile ilgili yararlı ek bilgiler sağlar.

Koruma sınıfı II

LOT numarası

Üretici

Geri dönüşüm sembolleri/kodları: Bunlar, malzeme ve malzemenin doğru kullanımı ile geri dönüşümü hakkında bilgi sağlarlar.

TR Kullanım Kılavuzu Shiatsu Ayak Masaj Aleti FM 883

⚠️📖🔍 Güvenlik uyarıları

Cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu, özellikle güvenlik uyarılarını itinayla okuyun ve ileride kullanmak üzere kullanım kılavuzunu saklayın. Cihazı üçüncü kişilere verdiğinizde, kullanım kılavuzunu da mutlaka beraberinde verin.

akım beslemesi

- Cihazı elektrik kaynağınıza bağladığınızda, tip plakasında belirtilen voltajın elektrik şebekenizle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik fişini sadece cihaz kapalıyken prize takın.
- Güç kablosunu ve cihazı ısıdan, sıcak yüzeylerden, nemden ve sıvılardan uzak tutun. Elektrik fişine asla ıslak veya nemli ellerle veya suda dururken dokunmayın.
- Cihazın elektrik voltajı taşıyan parçaları sıvı ile temas etmemelidir.
- Suya düşmüş bir cihazı elle çıkarmaya çalışmayın. Derhal elektrik fişini çekin.
- Cihaz, elektrik fişi serbestçe erişilebilir olacak şekilde bağlanmalıdır.
- Kullanımdan sonra cihazı daima AÇMA/KAPATMA şalteriyle ❹ kapatın ve elektrik fişini prizden çekin.
- Cihazı akım şebekesinden ayırmak için her zaman fişten tutarak çekin, asla elektrik kablosundan tutarak çekmeyin!
- Cihazı elektrik kablosundan tutmayın, çekmeyin veya çevirmeyin.
- Kablo veya elektrik fişi hasar görmüşse, aleti kullanmaya devam etmeyin.
- Elektrik kablosu hasarlıysa, tehlikeleri önlemek için, sadece **medisana**, yetkili bir uzman satıcı veya uygun niteliğe sahip bir kişi tarafından değiştirilebilir.
- Kabloların takılma tehlikesine yol açmamasına dikkat edin. Kablolar bükülmemeli, sıkıştırılmamalı veya döndürülmemelidir.

özel kişiler ile ilgili

- Bu cihazı, 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kabiliyetleri sınırlı ya da cihazı kullanma deneyimi ve bilgisi eksik olan kişiler, ancak başka bir kişinin gözetimi altında ve cihazın emniyetli kullanımı kendilerine iyice öğretildikten ve cihazın neden olabileceği tehlikeleri kavramaları sağlandıktan sonra kullanabilirler.
- Cihaz ile oynamamalarını garanti etmek için çocuklar gözetimsiz bırakılmamalıdır.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gözetimsiz yapılmamalıdır.
- Bu cihazı tıbbi uygulamaların desteklenmesi veya bunların yedeği olarak kullanmayın. Kronik şikayetler ve semptomlar daha da kötüleşebilir.
- Şu durumlarda **FM 883** Ayak Masaj Aletini kullanmamalısınız veya önce doktorunuza başvurmalsınız:
 - Hamilelik durumu söz konusuysa,
 - Kalp pili, yapay eklemler veya elektronik implantlarınız varsa,
 - aşağıdaki hastalıklardan bir veya daha fazlasına sahipsiniz: Dolaşım bozukluğu, varisli damarlar, açık yaralar, morluklar, cilt çatlakları, flebit.
- Cihazı göz yakınında veya diğer hassas vücut bölümlerinde kullanmayın.
- Ağrı veya masajı rahatsız edici hissettiğinizde uygulamayı durdurun ve doktorunuza danışın.
- Isıtma fonksiyonunu kullanırken dikkat. **Cihazda sıcak yüzeyler oluşur.** Aleti küçük çocuklarda, yardıma muhtaç veya ısıya duyarlı kişilerde kullanmayın.
- Açıklığa kavuşturulmamış ağrılarda, doktor tedavisi altındaysanız ve/veya tıbbi cihazlar kullanıyorsanız, masaj aletini kullanmadan önce doktorunuza başvurun.

cihazı çalıştırmadan önce

- Elektrik fişini, kabloyu veya masaj aletini her kullanımdan önce itinayla hasar bakımından kontrol edin. Arızalı bir ürün asla çalıştırılmamalıdır.
- Cihazda veya kabloda hasar görüldüğünde, kusursuz çalışmadığında, düşmüşse veya nemli olduğunda cihazı kullanmayın. Tehlikeleri önlemek için cihazı servis merkezine gönderin.

cihazı çalıştırmak için

- ⚠️** **Cihaz, ticari veya tıbbi kullanım için uygun değildir. Sağlık açısından endişeniz varsa, masaj aletini kullanmadan önce doktorunuza danışın.**
- 🏠** **Masaj aletini sadece kapalı mekanlarda kullanın!**
- 🚫** **Masaj aletini nemli odalarda kullanmayın (ör. yıkanırken veya duş alırken).**

- Cihazı sadece kullanım kılavuzuna göre amacına uygun kullanın.
- Amacına aykırı kullanımda garanti hakkı yitirilir.
- Cihazı sadece doğru pozisyonunda, yani bu kılavuzda açıklandığı gibi kullanın. **Cihaz vücut ağırlığınızı taşımak için tasarlanmamıştır!**

- Uyurken veya yatakta yatarken cihazı kullanmayın.
- Cihazı uyku öncesinde kullanmayın. Masajın canlandırıcı etkisi vardır.
- Cihazı asla bir araç veya makine kullanırken kullanmayın.
- Bir uygulamanın maksimum çalışma süresi 15 dakikadır. Daha uzun süreli kullanım cihazın ömrünü kısaltır.
- Uzun süreli kullanım aşırı ısınmaya yol açabilir. 15 dakikalık bir kullanım süresinden sonra cihazı tekrar kullanmadan önce **en az** 15 dakika soğumasını bekleyin.
- Cihazı asla doğrudan elektrikli ısıtıcı veya diğer ısı kaynaklarının yanına koymayın ve kullanmayın.
- Cihazı, elektrik şebekesine bağlı olduğunda gözetimsiz bırakmayın.
- Cihazın sıvı veya keskin cisimlerle temas etmesinden kaçının.
- Açıkken cihazın üzerini örtmeyin. Cihazı kesinlikle örtü veya yastık altında kullanmayın. Ateş, elektrik çarpması ve yaralanma tehlikesi söz konusudur.

bakım ve temizlik için

- Cihaz bakım gerektirmez. Buna rağmen bir arıza meydana gelirse, sadece elektrik fişinin fonksiyon bakımından güvenli şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin.
- Kendiniz cihazda sadece temizlik çalışmaları yapabilirsiniz. Her türlü garanti talebi yitirildiği için arıza durumunda cihazı kendiniz tamir etmeyin.
- Satıcınıza danışın ve onarımların sadece servis tarafından yapılmasını sağlayın.
- Cihazı suya veya başka sıvılara daldırmayın.
- Cihaza yine de sıvı ulaşırsa, hemen elektrik fişini çekin.

Cihaz ve kumanda elemanları

- 1 Sağ ve sol masaj yüzeyi
- 2 Gösterge ışıklı işletim modu seçim şalteri: 0 (KAPALI) - 1 (mavişık: Masaj) - 2 (kırmızı ışık: masaj ve ısı)
- 3 Taşıma kulpları
- 4 Kablo sargısı (cihazın alt tarafı)
- 5 Yüksekliği ayarlanabilen iki ayak
- 6 AÇMA/KAPATMA şalteri

Teslimat kapsamı ve ambalaj

Lütfen öncelikle teslimat kapsamının eksiksiz ve üründe hasar olup olmadığını kontrol edin. Tereddüt durumunda ürünü kullanmayın ve bir servis merkezine başvurun. Teslimat kapsamına dâhil olanlar:

- 1 **medisana** Ayak Masaj Aleti **FM 883**
- 1 Kullanım kılavuzu

Ambalajlar tekrar kullanılabilir veya hammadde döngüsüne geri verilebilir. Lütfen artık ihtiyaç duymadığınız ambalaj malzemelerini uygun şekilde bertaraf edin. Ambalajı açarken bir nakliye hasarı fark ederseniz lütfen derhal satıcınızla iletişime geçin.

⚠️ UYARI
Ambalaj folyolarının çocukların eline geçmemesine dikkat edin!
Boğulma tehlikesi söz konusudur.

FM 883 Ayak Masaj Aleti ne için kullanılır?

Ayaklar günlük hayatta çok zorlanır ve bu nedenle kas ağrılarına, sertleşmesine ve gerginliklere karşı özellikle hassastır. **medisana FM 883** Ayak Masaj Aletiyle ayaklarınızı şımartabilir ve uzun bir günün sonunda rahatlatabilirsiniz. Her masaj bir ısı uygulamasıyla kombine edilebilir. Bu rahatlamayı artırır, kan dolaşım sistemini harekete geçirir ve kas bölümlerine rahatlatıcı etki sağlar.

⚠️ DİKKAT
15 dakikalık çalışma süresinin aşılmasına dikkat edin!

Yükseklik ayarı

Yükseklik ayarını yapmadan önce cihazın kapalı ve elektrik şebekesinden ayrılmış olduğundan emin olun. Aletin alt tarafında bulunan yüksekliği ayarlanabilen iki ayağın ❹ döndürülmesiyle duruş yüksekliğini kişisel gereksinimimize uyarlayabilirsiniz. Uygun şekilde çevrildiğinde duyulabilir bir “klik” sesiyle yerine oturan 3 farklı yükseklik ayarı mevcuttur.

Ayak masajı

medisana FM 883 Ayak Masaj Aletini devrilmeye karşı emniyetli bir şekilde rahat bir sandalyenin önüne yerleştirin ve elektrik fişini bir prize takın.

1. Cihazı AÇMA/KAPATMA şalteriyle ❹ açın ve rahat bir şekilde sandalyeye oturun.
2. Masaj modunu seçmek için seçim şalterine ❷ bir kez basın. Gösterge ışığı mavi yanar ve dönen masaj başlıkları yavaş döner. Şimdi ayaklarınızı masaj yüzeylerine yerleştirin ❶.
3. Seçim şalterine ❷ tekrar basıldığında ısı fonksiyonu etkinleşir (gösterge ışığı kırmızı yanar ve dönen masaj başlıkları daha hızlı döner). Isı, kırmızı yanan masaj başlıkları üzerinden verilir.
4. Masaj ve ısı emisyonunu durdurmak için seçim şalterine ❷ üçüncü kez basın.
5. Cihazı AÇMA/KAPATMA şalteriyle ❹ kapatın.

Elektrik fişini prizden çekin. **Cihaz vücut ağırlığınızı taşımak için tasarlanmamıştır!**

Sırt masajı

Sırtın üst bölümü: Hissedilir bir dirence kadar ayarlanabilen ayakları saat yönünün tersine döndürün. Bu sayede aleti bir sandalyenin sırtlığına asabilirsiniz. Bunun için en iyisi yüksek bir sırtlığa sahip bir sandalye kullanın, ör. büro sandalyesi.

Sırtın alt bölümü: Masaj aletini, sırtlığa dayanacak şekilde bir sandalyenin veya koltuğun oturma yüzeyine dik şekilde yerleştirin.

1. Elektrik fişini bir prize takın ve kablounun gergin olmamasına dikkat edin. Fonksiyon şalterlerinin kullanımı ayak masajı talimatıyla aynıdır.
2. Masaj/ısı uygulamasını tamamladıktan sonra aleti AÇMA/KAPATMA şalteriyle ❹ kapatın. Elektrik fişini prizden çekin.

Uygulama süresi

Genel olarak bir masaj uygulaması 10 - 15 dakika sürebilir ve günde bir iki kez yapılabilirsiniz. Ancak her kullanımdan sonra tekrar çalıştırmadan önce cihazın tamamen soğumuş olmasına dikkat etmelisiniz!

Temizleme ve bakım

- Cihazı temizlemeden önce, cihazın kapalı olduğundan ve elektrik fişinin prize takılı olmadığından emin olun. Cihazın soğumasını bekleyin.
- Masaj aletini sadece hafif nemlendirilmiş bir süngerle temizleyin. Kesinlikle fırça, aşındırıcı temizlik maddeleri, benzin, inceltici veya alkol kullanmayın. Masaj aletini temiz, yumuşak bir bezle kurulaayın.
- Temizlemek için cihazı asla suya daldırmayın ve cihaza su veya başka sıvıların girmemesine dikkat edin.
- Cihazı ancak tamamen kuruduğunda tekrar kullanın.
- Kablo bükülmüşse, tekrar düz hale getirin.
- Kablo kırılmasını önlemek için elektrik kablosunu itinayla sarın.
- Cihazı en iyisi orijinal ambalajında ve güvenli, temiz, serin ve kuru bir yerde saklayın.

Bertaraf ile ilgili uyarılar

❌ Bu cihaz, evsel atık ile birlikte bertaraf edilmemelidir. Her tüketici tüm elektrikli veya elektronik cihazları, çevreye duyarlı bir şekilde bertaraf edilmeleri için, zararlı madde içerir içermediklerine bakılmaksızın, bulunduğu şehirdeki toplama noktalarına veya mağazalara teslim etmekle yükümlüdür. Bertaraf konusunda belediyenize veya satıcınıza danışın.

Teknik veriler

Tanımı ve modeli: **medisana** Ayak Masaj Aleti **FM 883**

Akım beslemesi:	220-240V~ 50/60Hz
Güç tüketimi:	50W
Çalışma koşulları:	Sadece kuru odalarda
Depolama koşulları:	Temiz, kuru ve serin
Ölçüleri:	Yakl. 40,5 x 36,5 x 12 cm
Ağırlık:	Yakl. 2,9 kg
Ürün numarası:	88396
EAN numarası:	40 15588 88396 5

Süreklili ürün geliştirmeleri kapsamında, teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkımızı saklı tutarız.

Bu kullanım kılavuzunun güncel sürümünü www.medisana.com adresinde bulabilirsiniz


Garanti ve onarım koşulları

Aşağıda belirtilen garantimiz, yasal garanti haklarınıza ilave niteliğindedir. Lütfen garanti durumunda bayinize veya doğrudan servis noktasına başvurun. Cihazı göndermek zorunda kalırsanız, lütfen arızayı belirtip satış fişinin bir fotokopisini ekleyin. Bu durumda aşağıdaki garanti şartları geçerlidir:

1. **medisana** ürünlerine satış tarihinden itibaren 3 yıllık bir garanti verilir. Satış tarihi garanti durumunda satış fişi veya fatura ile kanıtlanmalıdır.
2. Malzeme veya üretim hataları sonucunda ortaya çıkan kusurlar garanti süresi içinde ücretsiz giderilir.
3. Garanti hizmetiyle, ne cihaz ne de değiştirilmiş yapı parçaları için garanti süresi uzamaz.
4. Aşağıdaki hususlar garanti kapsamının dışındadır:
 - a. Usulüne aykırı kullanım, ör. kullanım kılavuzunun dikkate alınmamasından dolayı meydana gelmiş tüm hasarlar.
 - b. Alıcı veya yetkisiz üçüncü kişilerin yaptığı onarımdan veya müdahalelerden kaynaklanan hasarlar.
 - c. Üreticiden tüketiciye veya hizmet noktasına teslim edilirken meydana gelen nakliye hasarları.
 - d. Normal aşınmaya maruz kalan yedek parçalar.
5. Cihazdaki hasar garanti durumu olarak kabul edilmiş olsa da, cihazın neden olduğu doğrudan veya dolaylı zararlar için sorumluluk alınmaz.

medisana GmbH
Carl-Schurz-Str. 2
41460 NEUSS
ALMANYA

Servis adresini ayrı ek sayfada bulabilirsiniz.

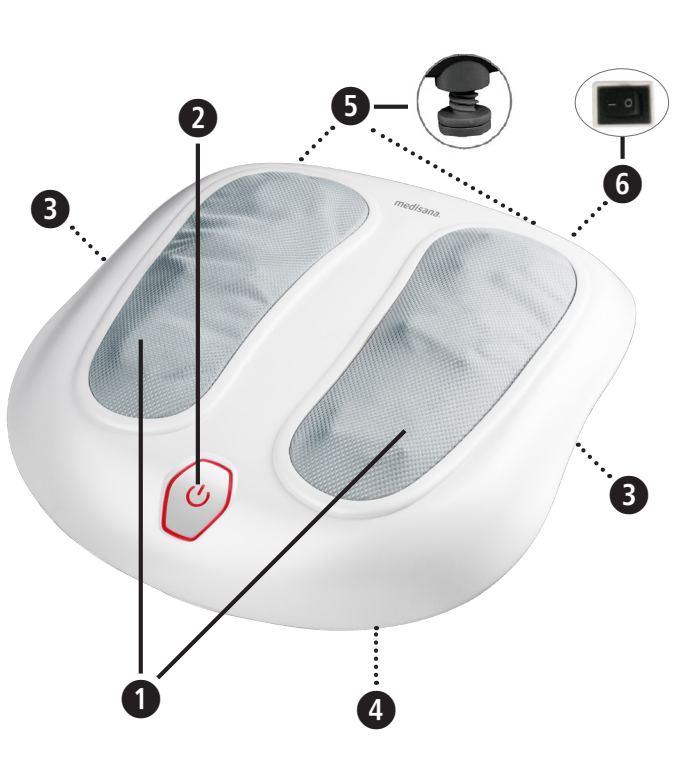

مفتاح الرموز

دليل الاستخدام هذا جزء لا يتجزأ من هذا الجهاز. هو يحتوي على معلومات مهمة بشأن التشغيل والاستعمال. اقرأ دليل الاستخدام هذا بالكامل. عدم اتباع هذه التعليمات قد يؤدي إلى حدوث إصابات خطيرة، أو قد يلحق بالجهاز أضرارًا جسيمة.

رموز التحذير

تحذير. يجب اتباع هذه الإرشادات التحذيرية؛ لتجنب تعرض المستخدم لأي إصابات محتملة.

تحذير

تنبيه يجب اتباع هذه التعليمات؛ لتجنب احتمالية لحاق أي أضرار بالجهاز.

تنبيه

ملاحظة

ملاحظة نَقِّم لك هذه الملاحظات معلومات إضافية مفيدة بشأن التركيب أو التشغيل.

ملاحظة

فئة الحماية II

رقم الشحنة

الشركة الصانعة



رموز/أكواد إعادة التدوير: تعمل على توفير معلومات حول المواد الخام، وحول الاستخدام السليم لها، وكذلك إعادة تدويرها.

دليل الاستخدامجهاز تدليك القدمين شياتسو طراز FM 883

إرشادات السلامة

أمن في قراءة دليل الاستخدام، لا سيما إرشادات السلامة، قبل استخدام الجهاز، واحفظ دليل الاستخدام للاستعانة به مستقبلاً. إذا أعطيت الجهاز لشخص آخر، يجب أن تعطيه تعليمات الاستخدام هذه أيضًا.

للإمداد بالطاقة

- تأكد من توافق الجهد الكهربائي المذكور على لوحة البيانات مع شبكة التيار الكهربائي لديك، قبل توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي.
- لا تضع قابس الكهرباء في المقبس إلا إذا كان الجهاز مغفلاً.
- ابتعد كابل الكهرباء والجهاز عن الحرارة والأسطح الساخنة والرطوبة والسوائل. احذر الإمساك بقابس الكهرباء بأيدي مبللة أو رطبة، أو في أثناء الوقوف في الماء.
- يجب ألا تلامس أجزاء الجهاز الموصلة للجهد الكهربائي أي سوائل.
- لا تُمسك جهازًا سقط في الماء. افصل قابس الكهرباء فورًا.
- يجب أن يكون الجهاز موصلًا بطارية يمكن من خلالها الوصول إلى قابس الكهرباء.
- احرص دائمًا على إيقاف تشغيل الجهاز فور الاستخدام، بواسطة مفتاح التشغيل/الإيقاف **6**، وافصل قابس الكهرباء عن المقبس.
- لا تمسك الكابيل وتسحبه مطلقًا، من أجل فصل الجهاز عن شبكة التيار، بل اسحب القابس دائمًا!
- لا تحمل الجهاز أو تسحبه أو تُدْره من كابل الكهرباء مطلقًا.
- إذا تعرض الكابل أو قابس الكهرباء للتلوث، فلا يجوز مواصلة استخدام الجهاز.
- إذا تعرض كابل الكهرباء للتلوث، فلا يمكن استبداله إلا بمعرفة ميديسانا **medisana** أو موزع متخصص معتمد أو بمعرفة شخص مؤهل لهذا؛ تجنبًا للتعرض لمخاطر.
- احرص على ألا يكون الكابل سببًا في تعثر الآخرين. يجب عدم تعريضه للثني أو الانحناس أو الالتواء.

بالنسبة إلى نوي الحالات الخاصة

- يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال بدءًا من عمر 8 سنوات فأكثر، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من قدرات بدنية أو حسية أو عقلية منخفضة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، شريطة الإشراف عليهم، وشرح كيفية الاستخدام الآمن لهم، وفهمهم للمخاطر التي ينطوي عليها استخدام الجهاز.
- يجب الإشراف على الأطفال؛ لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
- لا يُسمح للأطفال بإجراء أعمال التنظيف والصيانة الخاصة بالمستخدم دون مراقبة.
- لا تستخدم هذا الجهاز لتقديم المساعدة أو ليكون بديلًا لعلاجات طبية. فقد تتفاقم الآلام المزمنة والأعراض.
- ينبغي الامتناع عن استخدام جهاز تدليك القدمين طراز **FM 883** أو استشارة طبيبك أولاً، في الحالات التالية:
 - في حالة وجود حمل،
 - إذا كنت تحمل منظم ضربات قلب أو إذا كان لديك مفاصل صناعية أو أجهزة إلكترونية مزروعة داخل جسمك،
 - إذا كنت تعاني من واحد أو أكثر من الأمراض أو الأوجاع التالية: اضطرابات الدورة الدموية، أو دوالي الأوردة، أو الجروح المفتوحة، أو الرضوض، أو تشققات الجلد، أو التهابات الأوردة.
- لا تستخدم الجهاز بالقرب من العين أو أجزاء الجسم الحساسة الأخرى.
- إذا شعرت بالألم، أو شعرت بأن التدليك غير مريح، فتوقف حينها عن الاستخدام، وتحدث مع طبيبك.
- توخّ الحذر عند استخدام خاصية الحرارة. **فالجهاز به أسطح ساخنة.** لا تستخدم الجهاز على الأطفال الصغار ولا الأشخاص العاجزين ولا منْ لا يشعرون بالحرارة.
- استشر طبيبك قبل استخدام جهاز التدليك، في حالة وجود آلام غير مُبرّرة أو إذا كنت تخضع لعلاج طبيّ أو تستخدم أجهزة طبية.

قبل تشغيل الجهاز

- تحقّق بعناية من عدم وجود تلف بقابس الكهرباء والكابل وجهاز التدليك، قبل كل استخدام. فلا يجوز تشغيل جهاز تالف.
- لا تستخدم الجهاز في حالة وجود تلف ملحوظ فيه أو في الكابل، أو إذا لم يكن يعمل بشكل سليم، أو في حال سقوطه أو تعرضه لرطوبة. أرسل الجهاز إلى مركز الخدمة لإصلاحه، لتجنّب المخاطر.

لتشغيل الجهاز

- الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط، وغير مخصص للأغراض التجارية، أو للمجال الطبي.** فإذا كانت لديك مخاوف صحية، فتحدّث مع طبيبك قبل استخدام **جهاز التدليك**.
- لا تستخدم جهاز التدليك إلا في أماكن مغلقة!**
- لا تستخدم جهاز التدليك في أماكن رطبة (في أثناء الاستحمام في حوض الاستحمام أو تحت الدُش على سبيل المثال).**

- لا تستخدم الجهاز إلا للغرض المخصص له، وفقًا لتعليمات الاستخدام.
- في حالة إساءة الاستخدام، ينتهي الحق في المطالبة بالضمان.
- لا تستخدم الجهاز إلا في الوضعية الصحيحة، أي كما هو موضح في هذا الدليل. **الجهاز غير مُصمّم لتحمل وزن جسمك!**

- لا تستخدم الجهاز إذا كنت نائمًا أو مستلقيًا على السرير.
- لا تستخدم الجهاز قبل النوم. فالتدليك له تأثير تحفيزي.
- لا تستخدم الجهاز أبدًا في أثناء قيادة سيارة أو تشغيل ماكينة.
- تبلغ مدة التشغيل القصوى لأي استخدام 15 دقيقة. الاستخدام لفترة أطول من ذلك يُقصّر من العمر الافتراضي للجهاز.
- الاستخدام لفترة طويلة للغاية يمكن أن يؤدي إلى سخونة مفرطة. بعد استخدام الجهاز لمدة 15 دقيقة، اتركه يبرد لمدة 15 دقيقة أخرى **على الأقل**، قبل إعادة استخدامه.
- لا تضع الجهاز ولا تستخدمه بالقرب من موقد كهربائي، أو مصادر حرارة أخرى مباشرةً.
- لا تترك الجهاز دون مراقبة، إذا كان موصلًا بالكهرباء.
- تجنّب ملامسة الجهاز بأغراض مدمية أو حادة.
- لا تقم بتغطية الجهاز، عندما يكون مشغلاً. لا تستخدم الجهاز تحت الأغطية أو الوسادات. حيث ينطوي ذلك على خطر نشوب حريق وصدمة كهربائية وإصابة.

للصيانة والتنظيف

- الجهاز لا يحتاج لصيانة. لكن في حالة حدوث خلل، ما عليك سوى التحقّق من التوصيل السليم لقابس الكهرباء.
- لا يجوز لك أن تُجرى بنفسك أي أعمال على الجهاز سوى أعمال التنظيف. في حالة حدوث أعطال، لا تُصلّح الجهاز بنفسك؛ لأنّ ذلك سوف يتسبب في إلغاء أي حق في المطالبة بالضمان.
- اسأل وكيلك المتخصص، واعد لمركز الخدمة وحده بإجراء الإصلاحات.
- لا تغسِ الجهاز في الماء أو أي سوائل أخرى.
- لكن إذا وصل أي سائل إلى الجهاز، فافصل قابس الكهرباء فورًا.

نطاق الطهر المنطقي: ضع جهاز التدليك عموديًا على مقعد كرسي أو أريكة، بحيث يستقر على مسند الظهر.

- ادخل قابس الكهرباء في المقبس وانتبه إلى ألا يُشدّ الكابل. يتوافق استعمال المفاتيح الوظيفية مع دليل تدليك القدم.
- بعدها تنتهي من التدليك/المعالجة الحرارية، أوقف تشغيل الجهاز باستخدام مفتاح التشغيل/الإيقاف **6**. شدّ قابس الكهرباء من المقبس.

مدة الاستخدام
يمكنك أن تستغرق بشكل عام حوالي 10 إلى 15 دقيقة للعلاج بالتدليك والقيام بذلك مرّة أو مرتين يوميًا. ومع ذلك، يجب عليك التأكد من تبريد الجهاز تمامًا بعد كل استخدام قبل إعادة تشغيله مرّة أخرى!

التنظيف والعناية

- تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل تنظيفه، وافصل قابس الكهرباء عن المقبس. اترك الجهاز ليبرد.
- لا تُنظّف جهاز التدليك إلا باستخدام إسفنجة مبللة قليلًا. لا تستخدم أي فرش أو منظفات حادة أو بنزين أو مخففات أو كحول مطلقًا. ثم امسح جهاز التدليك بقطعة قماش نظيفة وناعمة.
- إياك أن تغمر الجهاز في الماء من أجل التنظيف، واحرص على عدم دخول ماء في الجهاز.
- لا تستخدم الجهاز مجففًا، إلا إذا كان جافًا تمامًا.
- لفّ الكابل بعناية؛ لتجنب قطعه.
- يُفضّل أن تُخزّن الجهاز في عبوته الأصلية، واحرص على تخزينه في مكان آمن ونظيف وبارد وجاف.

ملاحظة حول التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا الجهاز بإلقائه ضمن القمامة المنزلية. يلتزم كل مستهلك بتسليم الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة كافة - سواء أكانت تتضمن مواد ضارة أم لا - إلى أحد مراكز التجميع بمدينة أو إلى المتجر المعني؛ لكي يتسنى التخلص منها على نحو ملائم للبيئة. للتخلص من هذا الجهاز، يرجى التوجه إلى السلطات المحلية أو وكيلك.

البيانات الفنية	
الاسم والطراز:	جهاز تدليك القدمين ماركة medisana طراز FM 883
الإمداد بالطاقة:	220-240 فولط جهد كهربائي متردد، 50/60 هيرتز
استهلاك الطاقة والقدرة:	50 واط
ظروف التشغيل:	في الأماكن الجافة فقط
ظروف التخزين:	مكان نظيف وجاف وبارد
الأبعاد:	36.5 × 40.5 × 12 سم تقريبًا
الوزن:	2.9 كجم تقريبًا
رقم الصنف:	88396
الرقم الأوروبي للصنف:	5 88396 15588 40

تحتفظ لفسنا في إطار التحسينات المستمرة للمنتج، بحق إجراء تغييرات فنية وإبداعية.
يمكنك أن تجد النسخة الحالية من دليل الاستخدام هذا عبر الرابط www.medisana.com

شروط الضمان والإصلاح

حقوق الضمان القانوني الخاصة بك غير مقيدة بضماننا الموضح أدناه. في حالة طلب تفعيل الضمان، يرجى التوجه إلى المتجر المتخصص الذي تتعامل معه أو التوجه إلى مركز الخدمة مباشرةً. إذا تعيّن إرسال الجهاز، يُرجى ذكر العطل ورفاق نسخة من إيصال الشراء. عندئذ تسري شروط الضمان التالية:

1. مُنح منتجات ميديسانا **medisana** ضمانًا لمدة 3 سنوات بدءًا من تاريخ الشراء. في حالة طلب تفعيل الضمان، يجب إثبات تاريخ البيع من خلال قبسيمة الشراء أو الفاتورة.

2. يتم إصلاح أي أوجه قصور ناتجة عن عيوب في الخامات أو التصنيع مجانيًا خلال فترة الضمان.

3. الخدمة المُقَّمة في إطار الضمان لا ينشأ عنها إطالة لفترة الضمان، سواء للجهاز أو المكونات المستقبلية.

4. يستثنى من الضمان ما يلي:
أ. جميع الأضرار الناجمة عن التعامل غير السليم، بسبب عدم اتباع دليل الاستخدام على سبيل المثال.

ب. الأضرار التي ترجع إلى الإصلاح أو التدخلات التي تتم على يد المشتري أو طرف ثالث غير مصرح له.

ج. الأضرار الناتجة عن النقل، والتي تحدث في الطريق من الشركة الصانعة إلى المستهلك، أو في أثناء الإرسال إلى مركز الخدمة.

د. قطع الغيار، التي تخضع لتلفاك العادي.

5. لا تتحمل الشركة مسؤولية الأضرار اللاحقة المباشرة أو غير المباشرة التي يسببها الجهاز، حتى إذا تم الإقرار بأن التلف الذي سبّب هذه الأضرار مشمول بالضمان.

medisana GmbH Carl-Schurz-Str. 2 41460 NEUSS GERMANY
يمكن العثور على عنوان مركز الخدمة في الورقة المنفصلة المرفقة.

- شكّل الجهاز من خلال مفتاح التشغيل/الإيقاف **6** واجلس مسترخيًا على الكرسي.
- اضغط مفتاح زر الاختيار **2** مرّة واحدة لاختيار وضع التدليك. يضيء الضوء الإشاريّ باللون الأزرق وتندور رؤوس التدليك الدوّارة ببطء. ضع الآن قدميك بحذر على أسطح التدليك **1**.
- تُشغّل مضخة أخرى على مفتاح زر الاختيار **2** وظيفة السخونة (يضيء الضوء الإشاريّ من ثم باللون الأحمر وتندور رؤوس التدليك الدوّارة بسرعة أعلى). تشع السخونة عبر رؤوس التدليك المُضَيئة باللون الأحمر.
- اضغط مفتاح زر الاختيار **2** مرّة ثالثة لإيقاف التدليك وانبعاث السخونة.
- أطفي الجهاز بواسطة زر التشغيل والإيقاف **6**.

شدّ قابس الكهرباء من المقبس. **الجهاز غير مُصمّم لتحمل وزن جسمك!**

تدليك الظهر

نطاق الطهر العلوي: أدر الأقدام القابلة للتعديل في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة حتى تشعر بمقاومة واضحة. يتيح لك ذلك تليقّ الجهاز على ظهر الكرسي. من الأفضل استخدام كرسي ذي ظهر مرتفع، مثل كرسي المكتب.